

EH-NWA-60-PC - EH-NWA-60-PCX

Lift-up Wall Mounted Powder Coated Toilet Support, L 60 cm - White

EH-NWA-70-PC - EH-NWA-70-PCX

Lift-up Wall Mounted Powder Coated Toilet Support, L 70 cm - White

EH-NWA-80-PC - EH-NWA-80-PCX

Lift-up Wall Mounted Powder Coated Toilet Support, L 80 cm - White

EH-NWA-60-IX - EH-NWA-60-IXX

Lift-up Wall Mounted Polished Toilet Support, L 60 cm - Stainless Steel

EH-NWA-70-IX - EH-NWA-70-IXX

Lift-up Wall Mounted Polished Toilet Support, L 70 cm - Stainless Steel

EH-NWA-70-IX - EH-NWA-70-IXX

Lift-up Wall Mounted Polished Toilet Support, L 80 cm - Stainless Steel



EH-NWA-60-PC - EH-NWA-60-PCX

Barra ribaltabile da muro laccata, L 60 cm - Bianco

EH-NWA-70-PC - EH-NWA-70-PCX

Barra ribaltabile da muro laccata, L 70 cm - Bianco

EH-NWA-80-PC - EH-NWA-80-PCX

Barra ribaltabile da muro laccata, L 80 cm - Bianco

EH-NWA-60-IX - EH-NWA-60-IXX


Barra ribaltabile da muro lucida, L 60 cm - Acciaio Inox

EH-NWA-70-IX - EH-NWA-70-IXX

Barra ribaltabile da muro lucida, L 70 cm - Acciaio Inox

EH-NWA-70-IX - EH-NWA-70-IXX

Barra ribaltabile da muro lucida, L 80 cm - Acciaio Inox

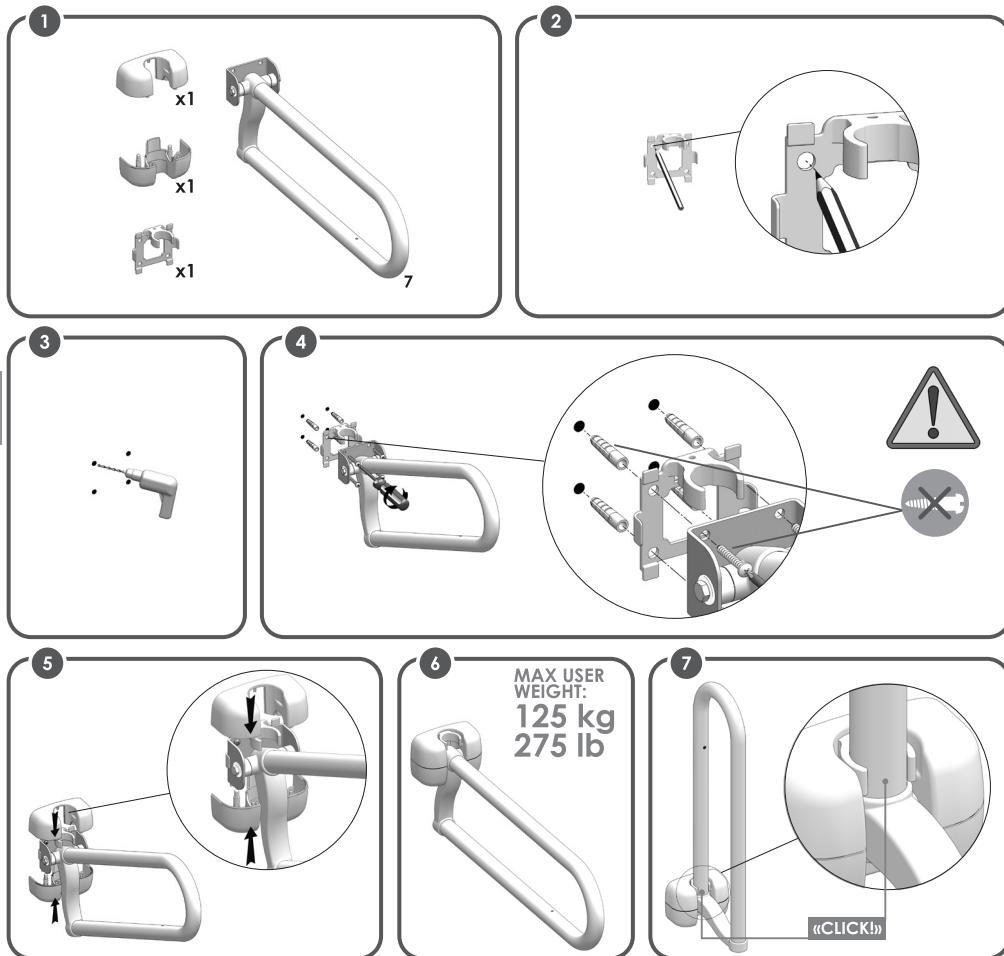

UM-KINGFB-KD Rev. 3 as of 2022/10

MADE IN ITALY



DESTINAZIONE D'USO:

I prodotti della linea *Barra Ribaltabile* permettono di aumentare indipendenza e stabilità dell'utente durante l'utilizzo quotidiano del bagno e del WC in particolare. Fungono da maniglie robuste e sicure, su cui l'utente può appoggiarsi e fare affidamento per alleviare parte del peso corporeo dalle gambe, riducendo l'affaticamento muscolare e il rischio di scivolamento e lesioni. Dopo l'utilizzo, la barra ribaltabile può essere riposta in posizione verticale ed bloccata dal sistema di sicurezza, prevenendone la caduta accidentale. La barra ribaltabile è disponibile in diversi materiali e lunghezze, e la possibilità di passare dalla posizione orizzontale a quella verticale ne rende agevole l'utilizzo anche in bagni compatti. La barra ribaltabile è disponibile anche con porta carta igienica, mantenendola in una posizione più accessibile, senza la necessità di ruotare la schiena.

INDICAZIONE E CONTROINDICAZIONI:

La barra ribaltabile è pensata per anziani, utenti in sedia a rotelle e a tutti coloro che necessitano di un ulteriore supporto durante l'utilizzo del bagno. L'utente deve avere la capacità di afferrare con fermezza la maniglia e sufficiente autonomia.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Il peso massimo utente indicato nelle istruzioni non deve essere superato.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la barra ribaltabile sia correttamente fissata alla parete.
- Durante l'assemblaggio, attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel manuale.
- Non modificare la barra ribaltabile in alcun modo.
- Non usare la barra ribaltabile se danneggiata. Cricche e deformazioni potrebbero fortemente influire sull'utilizzo in sicurezza del dispositivo.
- Non toccare la barra ribaltabile con mani sporche. La superficie scivolosa potrebbe ridurre la capacità di presa e causare una caduta.
- Non usare la barra ribaltabile per fini diversi da quelli previsti: la barra ribaltabile non deve essere impiegata come una scala.
- La barra ribaltabile non deve essere riposta all'aperto.
- Non inserire le braccia o la testa all'interno del tubo a U, sono presenti rischi residui di intrappolamento.
- Non mettere le mani e le dita in prossimità del meccanismo di piegamento della barra ribaltabile.
- Movimentare la barra sempre solo afferrando il tubo a U.
- Durante la movimentazione, accompagnare la barra ribaltabile sempre fino a fine corsa.

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:

La manutenzione del prodotto consiste nelle fasi di pulizia e igienizzazione. Per poter garantire un adeguato livello di igiene, l'utente deve ripetere queste operazioni prima di ogni utilizzo. L'utente deve accertarsi dell'integrità strutturale del dispositivo e dei suoi componenti. Per le operazioni di pulizia e igienizzazione, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Indossare guanti.
2. Rimuovere lo sporco più evidente prima di procedere con la disinfezione più approfondita.
3. Usare acqua o un detergente non aggressivo per la pulizia.
4. Asciugare con un panno asciutto e pulito.

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO:


Il prodotto è idoneo al riutilizzo da parte di altri utenti. Prima del riutilizzo da parte di altri, il prodotto deve essere correttamente pulito e igienizzato. Prima di cedere il prodotto ad altri, deve essere controllato da rivenditori qualificati.

PROCEDURA DI SMALTIMENTO:

Non gettare il prodotto tra i normali rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorità locali per la corretta procedura di smaltimento.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI:

Se il dispositivo dovesse essere coinvolto in un incidente, contattare il produttore all'indirizzo info@kdesign-group.com e l'autorità competente del proprio paese.

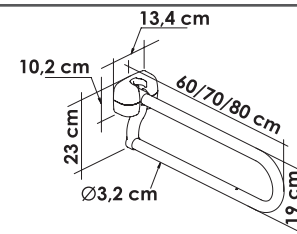

K design s.r.l.
Via Vincinella, Loc. Ghiarettolo
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Italy

(t) +39 0187 1987200
(w) www.kdesign-group.com
(e) info@kdesign-group.com



K design s.r.l.
Via Vincinella, Loc. Ghiarettolo
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Italy

(t) +39 0187 1987200
(w) www.kdesign-group.com
(e) info@kdesign-group.com

EH-NWA-60-PC - EH-NWA-60-PCX

Barra ribaltabile da muro laccata, L 60 cm - Bianco

EH-NWA-70-PC - EH-NWA-70-PCX

Barra ribaltabile da muro laccata, L 70 cm - Bianco

EH-NWA-80-PC - EH-NWA-80-PCX

Barra ribaltabile da muro laccata, L 80 cm - Bianco

EH-NWA-60-IX - EH-NWA-60-IXX

Barra ribaltabile da muro lucida, L 60 cm - Acciaio Inox

EH-NWA-70-IX - EH-NWA-70-IXX

Barra ribaltabile da muro lucida, L 70 cm - Acciaio Inox

EH-NWA-80-IX - EH-NWA-80-IXX

Barra ribaltabile da muro lucida, L 80 cm - Acciaio Inox



EH-NWA-60-PC - EH-NWA-60-PCX

Lift-up Wall Mounted Powder Coated Toilet Support, L 60 cm - White

EH-NWA-70-PC - EH-NWA-70-PCX

Lift-up Wall Mounted Powder Coated Toilet Support, L 70 cm - White

EH-NWA-80-PC - EH-NWA-80-PCX

Lift-up Wall Mounted Powder Coated Toilet Support, L 80 cm - White

EH-NWA-60-IX - EH-NWA-60-IXX


Lift-up Wall Mounted Polished Toilet Support, L 60 cm - Stainless Steel

EH-NWA-70-IX - EH-NWA-70-IXX

Lift-up Wall Mounted Polished Toilet Support, L 70 cm - Stainless Steel

EH-NWA-80-IX - EH-NWA-80-IXX

Lift-up Wall Mounted Polished Toilet Support, L 80 cm - Stainless Steel

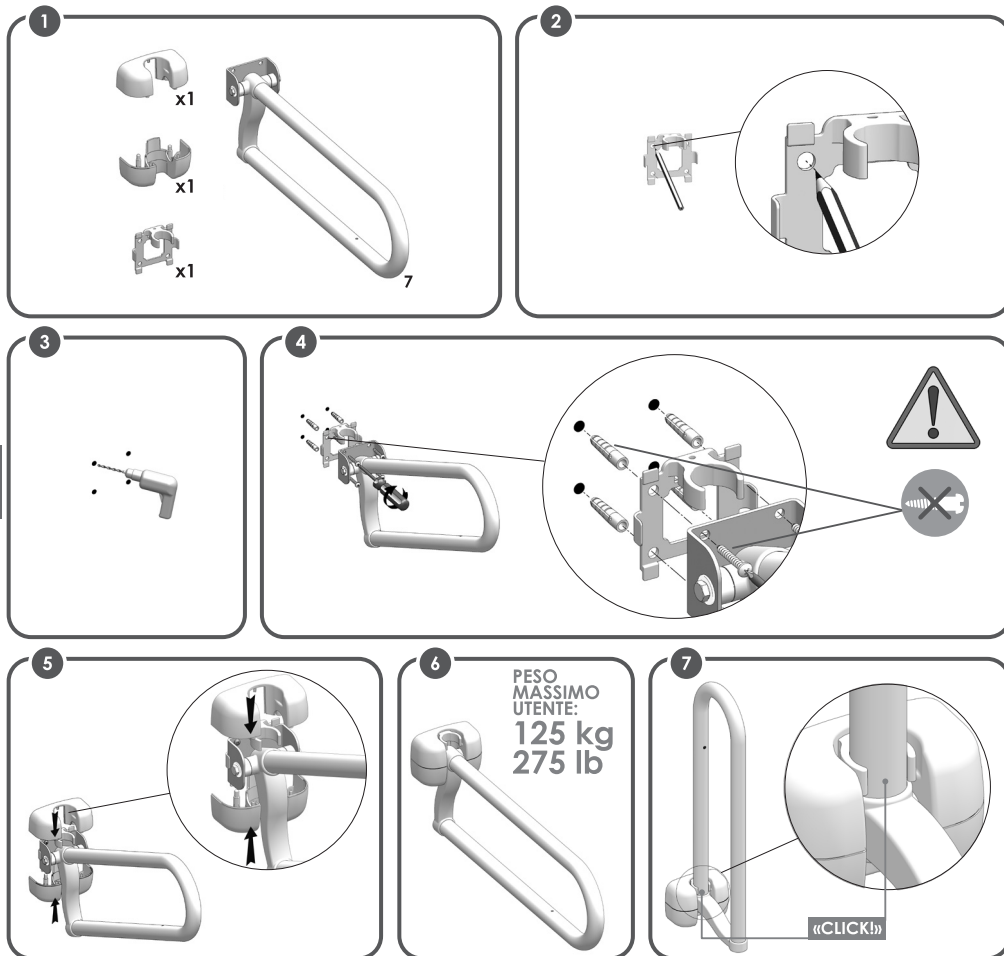

INTENDED USAGE:

The products of the *Lift-up Wall Mounted Toilet Support* line allow the user to increase independence and stability during the daily use of the bathroom or the toilet bowl more specifically. They work as a robust and safe handle, on which the user can hold on to relieve part of the body weight from the legs, reducing muscle fatigue due to standing position as well as slip and injuries risks. After use, the lift-up wall mounted support can be easily put back in vertical position and locked by its safety hook, preventing accidental falls in horizontal position. The lift-up wall mounted support is available in different materials and length, and thanks to the folding and locking mechanisms, it is suitable also for compact bathrooms. The lift-up wall mounted support can be provided with roll holder, keeping it in a more accessible position and avoiding spine twisting movements to reach it.

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS:

The Lift-up Wall Mounted Support is aimed towards elderly people, wheelchair users and to all those who need a further support during the use of the bathroom. The user is required to have sufficient ability to grip firmly the lift-up wall mounted support as well as sufficient autonomy.

SAFETY WARNING AND INDICATIONS:

- The maximum user weight indicated in the fitting instructions must not be exceeded.
- Before every use, be sure the lift-up wall mounted support is firmly fixed to the wall.
- During assembly, strictly adhere to what is shown in the User Manual.
- Do not modify the lift-up wall mounted support in any way.
- Do not use the lift-up wall mounted support if damaged or altered in any way. Cracks and deformations may strongly affect the performances and safety of the device.
- Do not touch the lift-up wall mounted support with greasy hands. Slippery surface may reduce the grip and could cause a fall.
- Do not use the lift-up wall mounted support for a different purpose from the intended one: it must not be used to replace a stair.
- The lift-up wall mounted support must not be stored outdoors.
- Do not place your head or arms in the U-shaped tube, some entrapment risk may occur.
- Do not place your hands and fingers close to the folding mechanism, always move the bar by grabbing the U-shaped tube only.
- Always lead the bar gently when moving it from vertical to horizontal position and vice versa.

MAINTENANCE INFO:

The products maintenance consists of the cleaning and sanitation procedures. In order to guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use. The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components and the tightness of the screws must be checked. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

1. Gloves should be worn.
2. Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate disinfection.
3. Use water or non aggressive detergent for the cleaning procedure.
4. Wipe with a dry and clean cloth.

REUSE REQUIREMENTS:

The product is suitable for reuse by other users. Before reuse by others, the product must be correctly cleaned and sanitized.


Before the transfer of the product to others, the product must be checked by qualified dealers.

CORRECT DISPOSAL PROCEDURE:

Do not dispose of the product in the normal household waste. Ask your local authority beforehand for the correct and environmentally friendly way to dispose it.

INCIDENT REPORTING:

If there was a serious incident involving this device, contact the manufacturer of this product at info@kdesign-group.com and the responsible authority in your country.

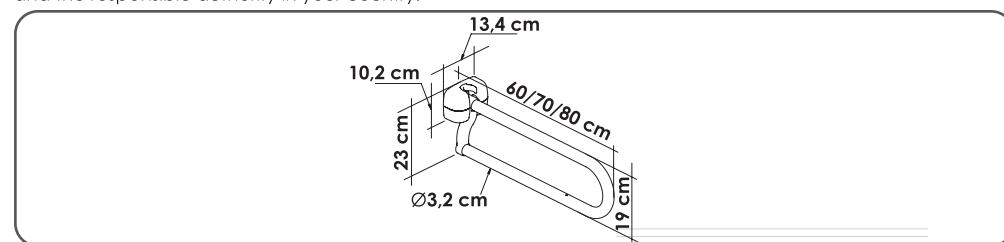

MADE IN ITALY



K design s.r.l.
Via Vincinella, Loc. Ghiarettolo
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Italy

(t) +39 0187 1987200
(w) www.kdesign-group.com
(e) info@kdesign-group.com



K design s.r.l.
Via Vincinella, Loc. Ghiarettolo
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Italy

(t) +39 0187 1987200
(w) www.kdesign-group.com
(e) info@kdesign-group.com